

INDIE HEALTH

Balanza

con Bluetooth 4.0


Modelo # 51-102




MANUAL DE INSTRUCCIONES ESPAÑOL

Lea las instrucciones en su totalidad antes de utilizar la unidad.

**¡ALTO!
ASEGÚRESE DE TENER TODOS LOS COMPONENTES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR LA BALANZA**

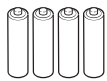

Cuatro (4)
baterías AAA

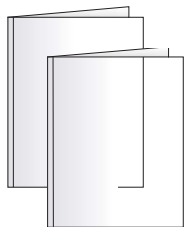

Manual de instrucciones

INTENCIÓN DE USO

Este producto está especialmente diseñado para la medición de peso corporal para las personas que son capaces de pararse en la plataforma de la balanza para los propósitos médicos. Nunca debe utilizarse para la verificación del peso de las mercancías. Resultados de peso personal deben discutirse con su médico o profesional sanitario; Este dispositivo no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad.

ÍNDICE

Información sobre cuidado y seguridad	18
Introducción	20
Generalidades del producto	20
Colocación de baterías.....	21
Selección de modos	21
Instrucciones de uso	22
Transmisión de datos.....	23
Cuidado y mantenimiento	24
Símbolos del dispositivo y de las etiquetas	24
Detección de problemas y códigos de errores	25
Información de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos	26
Especificaciones.....	27
Garantía.....	28

Distributed by Indie Health
251 26th Street
Del Mar, CA 92014

Made in China

#93-1355 02/17
©2017 Indie Health

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADO Y SEGURIDAD

NOTA: Lea con atención todas las instrucciones antes del uso. Cuando se usa un producto eléctrico se deben tener en cuenta las siguientes precauciones básicas.

PRECAUCIÓN: Si no lee ni presta atención a todas las precauciones, puede resultar lesionado(a) o dañar el equipo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No usar en pisos resbaladizos tales como cerámicos o plastificados.
- No usar con los pies mojados; séquese bien los pies antes de usar la balanza.
- No usar cerca de un teléfono celular u horno a microondas.
- No deje caer la balanza; ponga cuidado para no dejar caer elementos sobre ella; no salte sobre la balanza ni mientras esté sobre ella.
- Ubíquese en el centro de la balanza; no se pare sobre los bordes ni con los pies fuera de ellos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES

- No use la unidad si alguna de sus partes está dañada o si la parte superior está rota.
- Si se produce alguna anomalía, interrumpa el uso hasta que la unidad haya sido examinada y reparada.
- No desarme ni intente reparar la unidad, pues podría arrojar resultados erróneos y anulará la garantía del fabricante.
- Siempre siga las normas locales para desechar la balanza digital y las baterías en la forma correcta.
- No use este dispositivo con otros equipos de monitoreo de diagnóstico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA SU USO

- Si se usa a temperaturas diferentes a las indicadas, se puede producir un error en la medición o el mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura ambiente operativa es: 41°F - 104 °F (5°C - 40 °C); humedad: ≤90% de humedad relativa, como máximo.
- Lea y siga las instrucciones de uso indicadas en la sección correspondiente de este manual para garantizar el uso seguro de este dispositivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO

- Si la unidad se guarda a temperaturas diferentes a las indicadas, se puede producir un error en la medición o el mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura ambiente de almacenamiento es: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C); humedad: ≤90% de humedad relativa, como máximo.
- Evite guardar el dispositivo cerca de agua, humedad o excesiva humedad ambiental.
- Evite guardar el dispositivo en lugares de temperaturas extremas, exponerlo a la luz solar directa, al polvo o a un ambiente salino.
- Mantenga alejado del alcance de bebés, niños o personas discapacitadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA LIMPIEZA

- Nunca sumerja la unidad en agua para su limpieza, pues ello podría dañarla.
- Siga las instrucciones de la sección 'Limpieza y mantenimiento' de este manual acerca de cómo limpiar y cuidar la balanza.

ATENCIÓN!

Este manual ha sido diseñado para ofrecer instrucciones respecto del funcionamiento de esta balanza como un dispositivo de medición autónomo.



Su balanza con Bluetooth PUEDE ESTAR conectada a una aplicación de teléfono inteligente, a un dispositivo de alerta digital, a un hub o a otra tecnología de apoyo.

En la documentación que se entrega con este dispositivo encontrará las instrucciones para conectar su balanza con Bluetooth a otros dispositivos.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la balanza Indie Health. Lea este manual de instrucciones en su totalidad antes de utilizar la unidad para garantizar un uso seguro y efectivo y una vida útil prolongada del producto.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

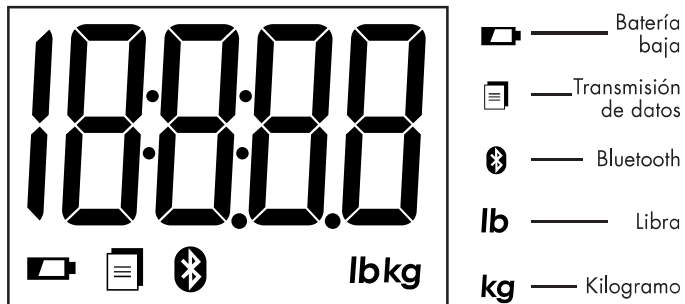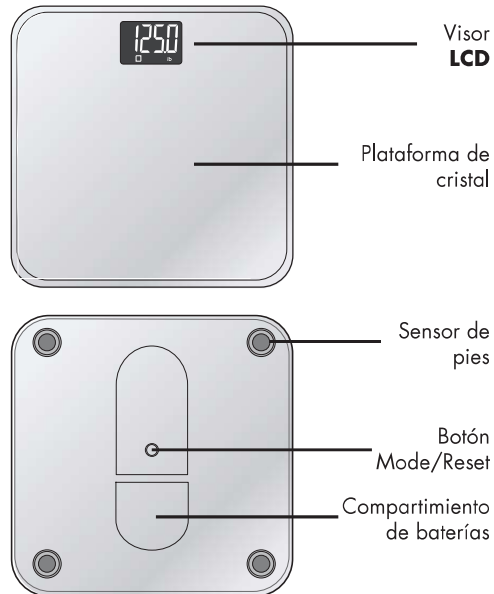


LOS DETALLES DE LA PANTALLA DIGITAL Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS SE INCLUYEN EN ESTE MANUAL.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS

Esta unidad requiere 4 baterías AAA.

Es necesario reemplazar las baterías cuando aparece el símbolo de "batería baja" en la pantalla o cuando ésta no se enciende al pararse sobre la balanza.

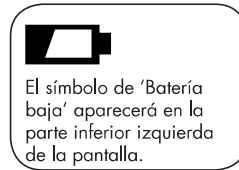


El compartimento de baterías se localiza en la parte inferior de este escala.



1. Suelte el seguro en la tapa del compartimento de baterías y retire la tapa.
2. Inserte o reemplace las 4 baterías AAA en el compartimento de baterías, verificando que las coloca de manera correspondiente con los símbolos de polaridad. Siempre use baterías nuevas.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimento de baterías.
4. Deseche las baterías de conformidad con los reglamentos locales de desecho y reciclaje.

Se recomienda retirar las baterías si no usará la unidad durante un período prolongado.

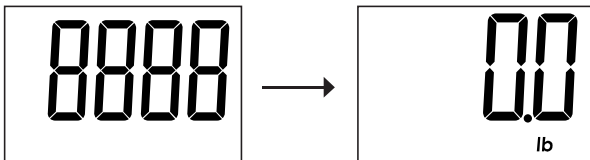


Cuando coloque las baterías por primera vez, la pantalla mostrará brevemente todos ochos.

Cuando la pantalla muestre 0.0, la balanza estará lista para realizar mediciones.

SELECCIÓN DEL MODO —LIBRA (LB) O KILOGRAMO (KG)

Esta balanza utiliza automáticamente de manera predeterminada la libra (LB) como unidad de medida.

1. Para cambiar el modo de la unidad de medida, pulse el botón MODE localizado en la parte de atrás del monitor.
2. La pantalla alternará entre 'lb' y 'kg'.
3. Cuando se muestre la unidad de medida deseada, libere el botón. Ya está configurado el modo de unidad de medida.

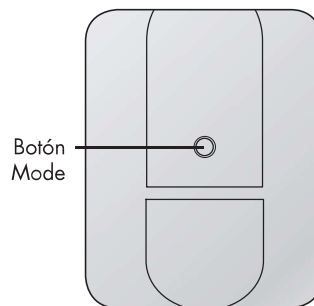

INSTRUCCIONES DE USO


Tecnología SENSE ON—La balanza se encenderá automáticamente cuando usted se pare sobre ella. No es necesario pulsar el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) de la unidad.

PARA ÓPTIMOS RESULTADOS:

- Pésese antes de comer
- Pésese a la misma hora; idealmente, a la mañana, después de ir al baño.
- Pésese desnudo(a) o con poca ropa.
- La balanza digital debe usarse en una superficie plana y dura.
- El uso en superficies suaves, como por ejemplo alfombrados, puede afectar la precisión de sus resultados.
- Quédese quieto(a); no se sostenga ni apoye en nada

INSTRUCCIONES SIMPLES PASO A PASO:

1. Párese sobre la pantalla. Quédese quieto(a), con los pies colocados en forma pareja sobre la superficie de la balanza para una distribución pareja del peso y resultados más precisos.
2. Quédese quieto(a) y en pleno contacto con la superficie de la balanza.
3. Espere unos segundos para que la balanza pueda calcular el resultado final; observará que los números fluctúan varias veces antes de llegar al peso real y que el símbolo de 'lb' o 'kg' parpadea. No se mueva ni desplace durante la medición.
4. Los resultados se mostrarán en la pantalla, en el modo seleccionado – lb o kg. Si la balanza está acoplada a un dispositivo inteligente y está activado el Bluetooth, procesará automáticamente la transmisión de datos y el símbolo de Bluetooth parpadeará. Para más información, consulte la sección Transmisión de datos, de este manual.
5. La balanza digital se apagará después de aproximadamente 10 segundos.

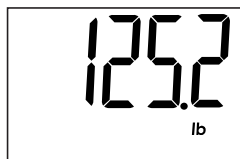

	El símbolo de Bluetooth dejará de parpadear para indicar una conexión exitosa.
	El símbolo de transmisión de datos desaparecerá después de una transferencia exitosa; si falló la transmisión, el símbolo permanecerá visible en la pantalla

TRANSMISIÓN DE DATOS

Con la aplicación de la tecnología avanzada Bluetooth 4.0, los equipos móviles o portátiles equipados con Bluetooth en línea con las especificaciones técnicas BLE, además del protocolo BLP establecido por la organización mundial Bluetooth SIG, son capaces de recibir sus datos de salud personales.

Cuando tanto la aplicación de la balanza como el Bluetooth estén activados, la balanza transmitirá los datos de la medición a su dispositivo móvil a través del Bluetooth.

Si no se transmiten las mediciones almacenadas, cuando usted evoque la memoria, parpadeará el ícono de Bluetooth. Active la aplicación y el Bluetooth para que se transmitan los datos. El ícono de Bluetooth desaparecerá cuando se transmitan los datos.

Módulo de Bluetooth No.: AW51822

Rango de frecuencia RF: 2402 MHz-2480 MHz

Rango de corriente de salida: 0dBm

Tensión de alimentación: 3.3~3.6 V

Distancia de transmisión: 10 metros

PRECAUCIÓN

Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo: 

Las personas delicadas, incluso las mujeres embarazadas con preeclampsia y quienes tienen instrumentos médicos electrónicos implantados, deben evitar usar la unidad en la medida de lo posible.

Mantenga el monitor, como mínimo, a 20 centímetros del cuerpo humano (especialmente, la cabeza) cuando se estén transmitiendo datos después de la medición.

A fin de posibilitar la función de transmisión de datos, este producto debe estar acoplado a un terminal de Bluetooth a 2,4 GHz.

¿Cómo mitigar posibles interferencias?

1. El rango entre el dispositivo y el terminal de BT debe estar razonablemente cerca, entre 1 y 10 metros. Asegúrese de que no existan obstáculos entre el dispositivo y el terminal de BT a fin de obtener una conexión de calidad y reducir el rango de salida de RF.
2. Para evitar interferencias, mantenga otros dispositivos electrónicos (particularmente los de transmisión inalámbrica / transmisor), como mínimo, a 1 metro del monitor.





CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Use el sentido común cuando efectúe la limpieza del dispositivo electrónico.




- Limpie de polvo la balanza con un paño suave o con un paño húmedo.
- Seque siempre la carcasa de la balanza después de limpiarla.
- Nunca moje excesivamente ni sumerja en agua la balanza.
- Nunca use propelente, abrasivo ni ninguna otra sustancia química para limpiar la balanza.
- No desarme este dispositivo, pues anulará la garantía del fabricante.
- Observe los rangos de temperatura operativa y de almacenamiento indicados en la sección Especificaciones de este manual.
- Observe el rango de capacidad indicado; el exceso de peso respecto del rango indicado podría dañar la unidad.
- Se recomienda retirar las baterías si no usará la balanza durante un período prolongado.

SÍMBOLOS DEL DISPOSITIVO Y DE LAS ETIQUETAS

Estos símbolos pueden aparecer en la balanza, instrucciones o embalaje y pueden variar según la marca y el modelo.

Símbolo	Significado
	Lea este manual—Antes de usar la balanza por primera vez se deben leer todos los manuales que se incluyen
	Advertencia—El símbolo indica una advertencia, prohibición u acción obligatoria que mitiga un riesgo que no es necesariamente obvio para el operador de la balanza
	Protección ambiental—disponga adecuadamente de este producto; consulte las ordenanzas locales para el adecuado reciclaje y desecho de la unidad
	Mantenga seco—Este aparato se debe mantener seco; nunca sumerja la unidad. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento en este manual para más información sobre la limpieza de su aparato

DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

ERROR	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
	Sobrecarga / demasiado peso sobre la balanza. Se apagará la unidad.	Esta balanza no es adecuada para un peso superior a 203 kg / 447.6 libras; deje de usarla
	Batería baja	Reemplace las cuatro (4) baterías AAA por nuevas
	Falló la carga de datos	Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo inteligente esté encendido; intente nuevamente sincronizar los resultados

ERROR	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
Pantalla LCD en blanco con el dispositivo encendido	El dispositivo no tiene baterías o, si las tiene, están mal colocadas; baterías agotadas.	Coloque cuatro (4) baterías AAA si aún no lo ha hecho; verifique la polaridad; coloque baterías nuevas
La balanza se activa, pero se apaga inmediatamente	Poca batería	Reemplace las cuatro (4) baterías AAA por nuevas
Falló la carga de datos	Transmisión por Bluetooth fuera de rango	Coloque su dispositivo inteligente más cerca de la balanza
	El Bluetooth en su dispositivo inteligente está desactivado	Active el Bluetooth en el dispositivo inteligente
	La aplicación está desactivada	Seleccione la aplicación para activarlo desde su dispositivo inteligente

INFORMACIÓN MPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso de este aparato está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inesperado.

NOTE: Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias de acuerdo con una instalación en particular. Si este equipo sí causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte responsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.

ESPECIFICACIONES

Nombre	Balanza con Bluetooth 4.0
Número de modelo	51-102
Sistema de pantalla	Pantalla digital/LCD, 74x53mm
Dimensiones	12-1/2" x 12-1/2" x 9/10" / 321 x 321 x 27.2 mm
Peso de la balanza	4.4 lbs./1.98 kg (sin baterías)
Unidad de medición	Libra (lb) / Kilogramo (kg)
Rango de medición	11 lb – 447.6 lb / 5 kg – 203 kg
División	0.2 lb; 0.1 kg
Precisión	50 kg: ±0.3kg; 100 kg: ±0.4 kg 150 kg: ±0.5 kg; 200 kg: ±0.7kg
Características operativas	Temperatura 41°F – 104°F (5°C – 40°C); Humedad ≤90% RH max; Presión atmosférica 86 kPa – 106 kPa
Características ambientales	Temperatura -4°F – 140°F (-20°C – 60°C); Humedad ≤90% RH max; Presión atmosférica 50 kPa – 106 kPa
Fuente de alimentación	6VDC 4 baterías AAAs
Encendido automático	Tecnología SenseOn
Auto-Off	Después de 10 segundos de no usarla
Mode of Operation	Operación continua
Accessories	Manual de instrucciones; cuatro (4) baterías AAA.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

El warrantor garantiza que su Pista de Calefacción Eléctrica de Lujo estará libre de defectos de producción bajo uso normal por un período de cinco-años. Esta garantía cubre solamente uso normal, y no se aplica para utilizar en ningunas aplicaciones clínicas o comerciales. Se anula esta garantía si la unidad se emplea mal o se abusa de cualquier manera.

Si el Pista de Calefacción Eléctrica no puede ajustarse a esta garantía limitada, vuelva el franqueo del Pista de Calefacción Eléctrica pagado por adelantado a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, el warrantor reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.